

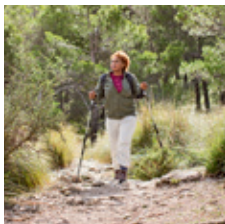


## Assortiment soins de plaies

Belgique: Février 2020

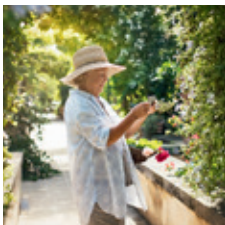


# Technologie Safetac® : Mode d'action

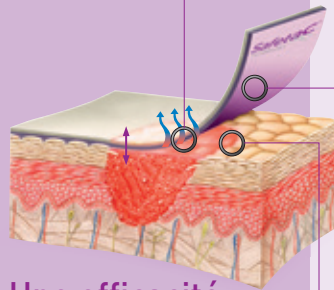

## Une efficacité prouvée


- Réf.1 : White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1 (3): 104-109.
- Réf.2 : Waring P. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.
- Réf.3 : Dykes PJ et al. Removal of a hydrocolloid dressing. Journal of Wound Care 2001; 10: 7-10.
- Réf.4 : Wiberg AM et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. World Union of Wound Healing Societies congress, Toronto, Canada, 2008.
- Réf.5 : Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management 2003.
- Réf.6 : White R.A. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.

## Moins de traumatisme

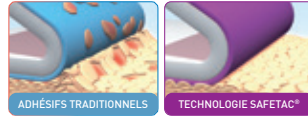


- ▷ Adhère en douceur sur les surfaces sèches de la peau périlésionnelle<sup>1,2</sup>
- ▷ Protège le tissu de cicatrisation
- ▷ N'arrache pas les cellules cutanées

## Moins de douleur

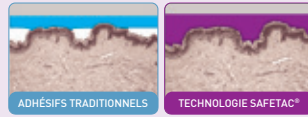


- ▷ Enduction d'une couche adhésive souple Safetac®
- ▷ Epouse les reliefs de la peau<sup>3</sup>
- ▷ Adhésion douce et sélective

## Absence de macération

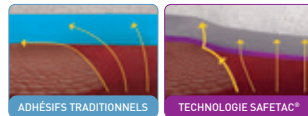

- ▷ Gestion optimale des exsudats grâce à un drainage vertical
- ▷ Pas de macération, scelle les berges de la plaie<sup>4,5</sup>
- ▷ Maintien du milieu humide optimal


## ▷ Les cellules épithéliales restent intactes<sup>3</sup>

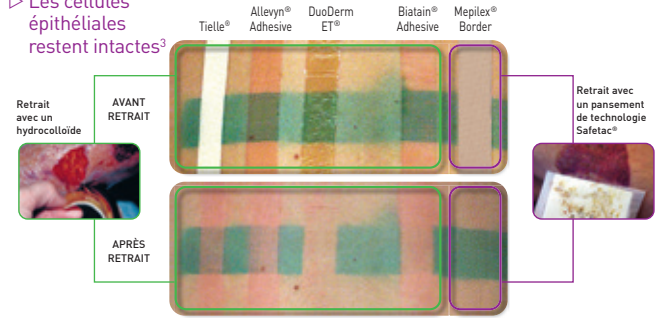

## ▷ Deux fois moins de douleur :

Evaluation de la douleur par le patient lors du retrait  
 0 = pas de douleur  
 10 = douleur insupportable

## Evaluation de la douleur par le patient<sup>6</sup>

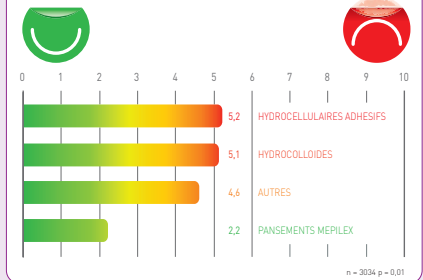

Film polyuréthane avec adhésif traditionnel




Film polyuréthane avec couche d'adhésion Safetac®


## Situation après application de l'encre sur la perforation

- ▷ L'encre s'infiltré sous le film
- ▷ Fuites latérales
- ▷ Risque de macération de la peau périlésionnelle
- ▷ L'encre reste dans la perforation
- ▷ Effet barrière
- ▷ La peau périlésionnelle reste saine et sèche

# Plaies superficielles

	Tissu (Tissue)				Infection	Pourtour (Edge)	
	Nécrose: Débrider	Fibrine: Nettoyer	Granulation: Protéger		Epithélialisation: Protéger	Rougeur, chaleur, douleur, gonflement	
Humidité (Moisture)	Sèche	Hydrogel + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex <sup>®</sup> Border Flex			Interface à couche ou film Mepitel <sup>®</sup> One ou Mepitel <sup>®</sup> Film	Hydrogel + Pansement hydrocellulaire adhésif antimicrobien Mepilex <sup>®</sup> Border Ag	Choisissez des pansements  pour minimiser le risque de <ul style="list-style-type: none"> <li>- la macération</li> <li>- la douleur et le traumatisme</li> <li>- cellules arrachées</li> <li>- les réactions allergiques</li> </ul>
	Humide	Pansement hydrocellulaire Mepilex <sup>®</sup> XT & Fixation Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup> ou Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex <sup>®</sup> Border Flex				Pansement hydrocellulaire antimicrobien Mepilex <sup>®</sup> Ag & Fixation Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup> ou Pansement hydrocellulaire adhésif antimicrobien Mepilex <sup>®</sup> Border Ag	Hydrater le pourtour sec de la plaie avec Epaderm Crème 
	Mouillée	Pansement nettoyant Mesalt <sup>®</sup> + Pansement hydrocellulaire Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup> ou + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Pansement fibre gélifiant Exufiber <sup>®</sup> + Pansement hydrocellulaire Mepilex <sup>®</sup> XT & Fixation Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup> ou Pansement fibre gélifiant Exufiber <sup>®</sup> + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex <sup>®</sup> Border Flex			Pansement alginate antimicrobien/ Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	
	Fortement mouillée		Pansement fibre gélifiant Exufiber <sup>®</sup> + Pansement superabsorbant Mextra <sup>®</sup> & Fixation Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup>			Pansement alginate antimicrobien/ Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Pansement superabsorbant Mextra <sup>®</sup> & Fixation Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRAATCH <sup>®</sup>	

# Plaies profondes

	Tissu (Tissue)				Infection	Pourtour (Edge)
	Nécrose: Débrider	Fibrine: Nettoyer	Granulation: Protéger		Épithélialisation: Protéger	Rougeur, chaleur, douleur, gonflement
Sèche	Hydrogel		Comresse humide		Interface à couche ou film Mepitel® One ou Mepitel® Film	Hydrogel + Pansement alginate antimicrobien/Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb® Ag / Exufiber® Ag+ + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex® Border Flex
Humide	Pansement alginate Melgisorb® Plus + Pansement hydrocellulaire Mepilex® XT & Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY ou + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex® Border Flex		Pansement fibre gélifiant Exufiber® + Pansement hydrocellulaire Mepilex® XT & Fixation Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY ou		Pansement alginate antimicrobien/ Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb® Ag / Exufiber® Ag+ + Pansement hydrocellulaire Mepilex® XT ou Fixation Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY ou	Choisissez des pansements  <b>SafetaC</b> TECHNOLOGY  pour minimiser le risque de - la macération - la douleur et le traumatisme - cellules arrachées - les réactions allergiques
Mouillé	Pansement nettoyant Mesalt® + Pansement hydrocellulaire Mepilex® XT & Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY ou + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex® Border Flex		Pansement fibre gélifiant Exufiber® + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex® Border Flex		Pansement alginate antimicrobien/ Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb® Ag / Exufiber® Ag+ + Pansement hydrocellulaire adhésif Mepilex® Border Flex	Hydrater le pourtour sec de la plaie avec Epaderm Crème
Fortement mouillé			Pansement fibre gélifiant Exufiber® + Pansement superabsorbant Mextra® & Fixation Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY		Pansement alginate antimicrobien/ Pansement antimicrobien à fibres gélifiantes Melgisorb® Ag / Exufiber® Ag+ + Pansement superabsorbant Mextra® & Fixation Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY	

Humidité (Moisture)



## PANSEMENTS HYDRO-CELLULAIRES ADHESIFS

Dimensions (cm) Pcs/bte Code CNK conditionn. N° d'article

### Mepilex® Border Flex



Pansement hydrocellulaire adhésif, morpho-adaptable

Lésions aiguës, comme abrasions et coupures. Plaies post-opératoires. Pour des zones anatomiques difficiles à panser p.ex. joints, zones pliables



#### Conditionnements (stériles)

7,8 x 10	5	4155-719	583500	NOUVEAU
13 x 16	5	4155-727	583300	NOUVEAU
15 x 19	5	4155-743	583400	NOUVEAU

### Mepilex® Border Flex



Pansement hydrocellulaire adhésif, morpho-adaptable

RECTANGULAIRE  
Pour des plaies aiguës et chroniques exsudatives à tous les stades de la cicatrisation.



#### Conditionnements (stériles)

7,5 x 7,5	5	3699-477	595200
10 x 10	5	3699-485	595300
15 x 15	5	3699-493	595400
15 x 20	5	3699-501	595600

### Mepilex® Border



Pansement hydrocellulaire adhésif

Prévention et traitement des escarres.



#### Conditionnements (stériles)

7,5 x 7,5	5	2339-703	295200
10 x 10	5	2339-729	295300
15 x 15	5	2339-745	295400
15 x 20	5	2339-760	295600
10 x 20	5	2594-406	295800
10 x 25	5	2777-274	295850
10 x 30	5	2594-422	295900

### Mepilex® Border Lite



Pansement hydrocellulaire adhésif mince

Lésions aiguës comme abrasions et coupures. Lésions aux doigts.



#### Conditionnements (stériles)

4 x 5	10	2256-592	281000
5 x 12,5	5	2256-626	281100
7,5 x 7,5	5	2256-634	281200
10 x 10	5	2256-667	281300
15 x 15	5	2256-683	281500

Dimensions (cm) Pcs/bte Code CNK conditionn. N° d'article

### Mepilex® Border Sacrum



Pansement hydrocellulaire adhésif, spécialement adapté au sacrum



Prévention et traitement des escarres sacrées



#### Conditionnements (stériles)

16 x 20	5	3586-963	282050
22 x 25	5	3586-971	282450

### Mepilex® Border Heel



Pansement hydrocellulaire adhésif, spécialement adapté au talon



Prévention et traitement des escarres des talons



#### Conditionnements (stériles)

22 x 23	6	3590-114	282750
---------	---	----------	--------

### Mepilex® Border Post-Op



Pansement adhésif et absorbant

Plaies postopératoires



#### Conditionnements (stériles)

6 x 8	10	n/a	496100
9 x 10	10	n/a	496200
10 x 15	10	n/a	496300
10 x 20	10	n/a	496400
10 x 25	10	n/a	496450
10 x 30	10	n/a	496600
NOUVEAU 10 x 35	5	n/a	496650
10 x 20	5	3633-377	496405
10 x 25	5	3633-385	496455
10 x 30	5	3633-393	496605

## PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES

### Mepilex® XT



Pansement hydrocellulaire muni de canaux d'exsudats

Pour des plaies aiguës et chroniques exsudatives à tous les stades de la cicatrisation comme p.ex. les ulcères de la jambe et du pied diabétique, les escarres et les plaies traumatiques.



#### Conditionnements (stériles)

5 x 5	5	3465-333	211015
10 x 10	5	3319-217	211100
10 x 20	5	3319-225	211200
15 x 15	5	3319-233	211300
20 x 20	5	3319-241	211400
20 x 50	2	3465-325	211500

## Mepilex® SafetaC TECHNOLOGY

Ulcères de jambes et de pieds.  
Brûlures superficielles  
du 2<sup>ème</sup> degré.



Pansement hydrocellulaire

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 5	5	2973-725	294015
10 x 10	5	1446-780	294100
12,5 x 12,5	5	2442-994	294000
12,5 x 12,5	16	2443-026	294050
10 x 20	5	1446-806	294200
15 x 15	5	1446-822	294300
20 x 20	5	1446-848	294400
20 x 50	2	2602-860	294500

## Mepilex® Lite SafetaC TECHNOLOGY

Pieds diabétiques. Plaies  
cancéreuses et radiodermites.




Pansement hydrocellulaire mince

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
6 x 8,5	5	2115-236	284000
10 x 10	5	2115-251	284100
15 x 15	5	2115-277	284300
20 x 50	4	3028-677	284500

## Mepilex® Transfer SafetaC TECHNOLOGY

Plaies cancéreuses, radiodermites sèches à  
fortement exsudatives. Epidermolyse Bulleuse.

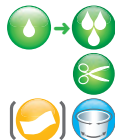

Pansement hydrocellulaire  
de transfert d'exsudat

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
15 x 20	5	1747-401	294800
20 x 50	4	3003-332	294502

## Mepilex® Heel SafetaC TECHNOLOGY

Escarres des talons.



Pansement hydrocellulaire,  
spécialement adapté au talon

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
13 x 20	5	2315-570	288100
15 x 22	5	2678-373	288300

## INTERFACES

## Mepitel® One SafetaC TECHNOLOGY

Skin tears. Plaies aux  
doigts, autres plaies  
aiguës. Traitement  
par pression négative.



Interface à couche  
d'adhésion unilatérale

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 7,5	10	2678-399	289100
7,5 x 10	10	2678-415	289300
10 x 18	10	2678-449	289500
6 x 7	5	3958-543	289170
9 x 10	5	3958-550	289270
13 x 15	5	3958-568	289470
17 x 25	5	2678-464	289700

NOUVEAU  
NOUVEAU  
NOUVEAU

## Mepitel® SafetaC TECHNOLOGY

Skin tears,  
Epidermolyse  
Bulleuse.  
Traitement par  
pression négative.



Interface à couche d'adhésion bilatérale

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 7,5	10	1183-185	290510
7,5 x 10	10	1183-193	290710
10 x 18	10	1183-201	291010
20 x 30	5	1183-219	292005

### Conditionnements par 2 pièces (stériles)

5 x 7,5	2	1599-620	290580
---------	---	----------	--------

## PANSEMENTS FIBRES ET ALGINATES

## Exufiber®

Pour plaies profondes  
et superficielles  
comme p.ex. les  
escarres, plaies du  
pied diabétique, ulcères  
de jambe et cavités



Pansement fibre gélifiant  
hautement absorbant

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 5	10	3984-572	709900
10 x 10	10	3984-580	709901
15 x 15	10	3984-598	709903
20 x 30	5	3984-606	709904
2 x 45	5	3984-622	709909
4,5 x 20	10	3984-614	709906

## Melgisorb® Plus

Escarres, ulcères de jambe  
et plaies post-opératoires  
modérément à fortement  
exsudatives.



Pansement alginate hautement  
absorbant, hémostatique

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 5	10	3057-502	252000
10 x 10	10	3057-510	252200
10 x 20	10	3057-528	252500
3 x 45 (mèche)	5	3057-551	253500



## Mesalt®

Nécrose purulente.



Pansement absorbant  
imprégné de chlorure de sodium

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
5 x 5	30	1457-332	285580
7,5 x 7,5	30	1457-340	285780
10 x 10	30	1457-357	286080
2 cm x 1 m (mèche)	10	1599-638	285280

### FIXATION

## Mepitel® Film

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Protection de la peau, fixation de pansements, traitement et prévention des lésions cutanées, traitement des brûlures superficielles et prévention des réactions cutanées péri-radiothérapie.



Film siliconé, auto-fixant, transparent et semi-perméable

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
6 x 7	10	2941-284	296100
10 x 12	10	2941-250	296200
10 x 25	10	2941-268	296400
15 x 20	10	2941-276	296600

## Mepitac®

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Fixation des drains, tubes, sondes, électrodes



Ruban de fixation

### Conditionnements (non stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
2 cm x 3 m	1	2205-433	298300
4 cm x 1,50 m	1	2205-474	298400

### PANSEMENT CICATRICIEL

## Mepiform®

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Cicatrices hypertrophiques, des chéloïdes et des plaies fermées.



Pansement cicatriciel

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
4 x 30	5	1457-266	293100
5 x 7,5	5	1457-274	293200
10 x 18	5	1457-282	293400



### PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES ADHÉSIFS ANTIMICROBIEN

Dimensions (cm) Pcs/bte Code CNK conditionn. N° d'article

## Mepilex® Border Ag

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Pansement hydrocellulaire adhésif antimicrobien

Escarres. Lésions postopératoires.

Si les plaies présentent des signes d'infection, ou à titre préventif.

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
12,5 x 12,5	5	2696-565	395010
17,5 x 17,5	5	2696-581	395410
10 x 20	5	2696-615	395800
10 x 25	5	2777-282	395700
10 x 30	5	2696-631	395900



## Mepilex® Border Sacrum Ag

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Pansement hydrocellulaire antimicrobien adhésif adapté au sacrum

Escarres sacrées. Si les plaies présentent des signes d'infection, ou à titre préventif.

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
18 x 18	5	2696-656	382000
23 x 23	5	2696-672	382400



### PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES ANTIMICROBIEN

## Mepilex® Ag

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Pansement hydrocellulaire adhésif antimicrobien

Escarres. Lésions postopératoires.

Si les plaies présentent des signes d'infection, ou à titre préventif.

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
6 x 8,5	5	2441-962	287021
12,5 x 12,5	5	2440-899	287121
10 x 21	5	2440-907	287221
17,5 x 17,5	5	2440-915	287321
20 x 50	2	2602-852	287510



## Mepilex® Heel Ag

*SafetaC*  
TECHNOLOGY

Pansement hydrocellulaire antimicrobien adapté au talon

Escarres des talons.

Si les plaies présentent des signes d'infection, ou à titre préventif.

### Conditionnements (stériles)

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
13 x 20	5	2709-038	388100
15 x 22	5	2777-290	388300



## PANSEMENT ANTIMICROBIEN À FIBRES GÉLIFIANTES/ PANSEMENT ALGINATE ANTIMICROBIEN

### Exufiber® Ag+

Ulcères veineux de la jambe et ulcères du pied diabétique moyennement à fortement exsudatifs si risque ou signes d'infection.



Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

Pansement fibre gélifiant imprégné d'argent

#### Conditionnements (stériles)

5 x 5	10	3984-523	603401
10 x 10	10	3984-531	603402
15 x 15	10	3984-549	603403
20 x 30	5	3984-564	603407
2 x 45 (mèche)	5	3984-515	603400
4,5 x 20 (mèche)	10	3984-556	603405

### Melgisorb® Ag

Escarres, ulcères de jambe et plaies post-opératoires modérément à fortement exsudatives. Si risque ou signes d'infection.



Pansement alginat antimicrobien, hémostatique imprégné d'argent

#### Conditionnements (stériles)

5 x 5	10	2602-621	256055
10 x 10	10	2602-639	256105
15 x 15	10	2602-647	256155
3 x 44 (mèche)	10	2602-654	256605

## SOIN DE LA PEAU

### Epaderm® Crème

Une crème pour le traitement d'appoint de l'eczéma, du psoriasis et tous états de sécheresse cutanée. Traitement de base pour des zones légèrement à moyennement atteintes.

Sans paraben,  
sans additifs  
d'odeur  
et de couleur



#### • Ne contient que 6 ingrédients

- Paraffine jaune douce
- Paraffine liquide
- Cire émulsifiante
- Eau purifiée
- Chlorocrésol
- Glycérine

Contenu	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
---------	---------	----------------------	--------------

50 g	12	2733-350	99400823
500 g	6	2733-723	99400824

## PANSEMENTS ÎLE

### Mepore® Pro

Plaies postopératoires et plaies aiguës.



Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

Pansement absorbant nontissé adhésif

#### Conditionnements (stériles)

6 x 7	10	2382-190	680840
9 x 10	10	2382-208	680940
9 x 15	10	2382-216	681040
9 x 20	10	2382-224	681140
6 x 7	60	1619-782	670820
9 x 10	40	2308-526	670920
9 x 15	40	2308-534	671020
9 x 20	30	1619-840	671120
9 x 25	30	1619-865	671220
9 x 30	30	1619-881	671320

### Mepore®

Plaies postopératoires et plaies aiguës.



Pansement absorbant nontissé adhésif

#### Conditionnements (stériles)

6 x 7	10	0615-351	670870
9 x 10	5	0190-942	670970
9 x 15	5	0190-959	671070
6 x 7	60	1599-646	670800
9 x 10	50	1599-653	670900
9 x 15	50	1599-661	671000
9 x 20	30	1599-679	671100
9 x 25	30	1599-687	671200
9 x 30	30	1599-810	671300
9 x 35	30	1599-844	671400

#### Conditionnements (non stériles)

2 m x 7 cm (roul.)	1	0615-005	332080
--------------------	---	----------	--------

### Mepore® Film & Pad

Plaies postopératoires et plaies aiguës.



Film adhésif, transparent et semi-perméable avec compresse

#### Conditionnements (stériles)

4 x 5	5	2509-537	275110
5 x 7 ovale	5	2509-545	275210
5 x 7	5	2509-552	275310
9 x 10	5	2509-560	275410
9 x 15	5	2509-578	275510
9 x 20	5	2509-586	275610
4 x 5	85	2539-120	275100
5 x 7 ovale	85	2539-138	275200
5 x 7	85	2539-146	275300
9 x 10	30	2539-153	275400
9 x 15	30	2539-161	275500
9 x 20	30	2539-187	275600
9 x 25	30	2539-195	275700
9 x 30	25	2539-211	275800
9 x 35	25	2539-229	275900



## PANSEMENTS FILM

### Mepore® Film

Protection de la peau, fixation secondaire des pansements et couverture des plaies propres en phase de granulation.



Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

Film adhésif, transparent, semi-perméable

#### Conditionnements (stériles)

6 x 7	10	2440-865	270670
10 x 12	10	2440-873	271570
10 x 25	10	2440-881	272570
15 x 20	10	2440-857	273000
6 x 7	100	2440-808	270600
10 x 12	70	2440-824	271500
10 x 25	20	2440-840	272500

### Mepore® IV

Fixation des intraveineuses et d'autres cathéters intravasculaires.



Pansement film adhésif, semi-perméable

#### Conditionnements (stériles)

5,5 x 5	100	2398-824	274000
8 x 9	70	2398-832	274200
10 x 11	70	2398-840	274400

## FIXATION

### Mefix®

Fixation secondaire de pansements, compresses, cathéters et sondes.



Bande adhésive en nontissé extensible

#### Conditionnements (non stériles)

2,5 m x 5 cm	1	0614-966	310570
2,5 m x 10 cm	1	0614-974	311070
2,5 m x 15 cm	1	0614-982	311570
10 m x 2,5 cm	1	0839-951	310250
10 m x 5 cm	1	0839-969	310500
10 m x 10 cm	1	0183-137	311000
10 m x 15 cm	1	0890-483	311500
10 m x 20 cm	1	0890-491	312000
10 m x 30 cm	1	0137-729	313000

## Tubi

WITH 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY



La fixation idéale pour les pansements Mepilex®

Bandage tubulaire léger, extensible en largeur et en longueur.



N° d'art.	Code CNK/ pièce	Largeur x Longueur (cm x m)	Membres	Bte (pces)	Emb. transport (pcs)
<b>LIGNE ROUGE</b>	2480	2380-285	3,5 x 1	9 - 18 cm	12 36
2434	0628-180	3,5 x 10	9 - 18 cm	1	20
<b>LIGNE VERTE</b>	2481	2380-293	5 x 1	14 - 24 cm	12 36
2436	0628-198	5 x 10	14 - 24 cm	1	24
<b>LIGNE BLEUE</b>	2482	2380-301	7,5 x 1	24 - 40 cm	12 36
2438	0628-206	7,5 x 10	24 - 40 cm	1	30
<b>LIGNE JAUNE</b>	2483	2380-319	10,75 x 1	35 - 64 cm	12 36
2440	0628-214	10,75 x 10	35 - 64 cm	1	12
<b>LIGNE POURPRE</b>	2479	2380-277	20 x 1	64 - 130 cm	12 48
2444	2380-269	20 x 10	64 - 130 cm	1	15

## PANSEMENTS SUPER-ABSORBANTS

Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

### Mextra® Superabsorbent

Plaies modérément à fortement exsudatives. Comme pansement secondaire pour Mepitel®, Mepitel® One.

Pansement super-absorbant, non adhésif, stérile, multi couches



#### Conditionnements (stériles)

10 x 10	10	3586-559	610700
10 x 15	10	3586-567	610710
10 x 20	10	3586-575	610720
15 x 20	10	3586-583	610730
20 x 25	10	3586-591	610740
20 x 30	10	3586-609	610750
20 x 40	10	3586-617	610760

### Mesorb®

Application directe sur des plaies fortement exsudatives. Comme pansement secondaire pour Mepitel®, Mepitel® One.

Pansement souple, fortement absorbant, semi-perméable et non adhésif en nontissé



#### Conditionnements (stériles)

10 x 13	50	2490-498	677001
13 x 15	50	2490-514	677201
10 x 23	50	2490-522	677401
15 x 23	50	2490-530	677601
23 x 25	30	2490-555	677701
23 x 30	30	2490-563	677801



Gamme conventionnelle

Gamme conventionnelle

## COMPRESSES ET TAMPONS

### Mesoft®

Absorption, nettoyage, protection, désinfection, tamponnage.



Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

Tampons et compresses en nontissés

#### Compresses (non stériles) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 couches)

5 x 5	100	1337-674	156015
7,5 x 7,5	100	1337-682	156115
10 x 10	100	1337-708	156315
10 x 20	100	1337-724	156415
5 x 5	300	2398-923	156000
7,5 x 7,5	300	2460-020	156100
10 x 10	200	2460-038	156300
10 x 20	200	2460-046	156400

#### Compresses (non stériles) (30 gr/m<sup>2</sup> - 4 couches)

5 x 5	100	1641-265	157000
7,5 x 7,5	100	1641-273	157100
10 x 10	100	1641-299	157300
10 x 20	100	1642-487	157400

#### Compresses (stériles) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 couches) (par paquet de 2 ou 5 pièces)

5 x 5	75 x 2	2336-675	156040
5 x 5	30 x 5	2336-683	156065
7,5 x 7,5	75 x 2	2336-691	156140
7,5 x 7,5	30 x 5	2336-717	156165
10 x 10	75 x 2	2336-725	156340
10 x 10	30 x 5	2336-733	156365
10 x 20	60 x 2	2336-741	156440
10 x 20	24 x 5	2336-758	156465

#### Compresses fendues (stériles) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 couches)

10 x 10	130 x 1	2336-667	155030
---------	---------	----------	--------

#### Tampons ronds (non stériles) (40 gr/m<sup>2</sup>)

(S) Ø 2,8	100	2342-327	156700
(M) Ø 3,9	100	1337-807	156800
(L) Ø 4,5	100	1337-815	156900

#### Tampons ronds (stériles) (40 gr/m<sup>2</sup>) (par paquet de 5 pièces)

(S) Ø 2,8	20 x 5	2336-766	156760
(M) Ø 3,9	20 x 5	2336-774	156860
(L) Ø 4,5	14 x 5	2336-782	156960



### Gauze™

Absorption, nettoyage, protection, désinfection, tamponnage.



Dimensions (cm)	Pcs/bte	Code CNK conditionn.	N° d'article
-----------------	---------	----------------------	--------------

Tampons et compresses de gaze

#### Compresses (non stériles)

7 x 10 (8 couches)	150	2583-128	152400
5 x 5 (8 couches)	150	2380-871	153100
5 x 5 (12 couches)	120	2583-565	153000
7,5 x 7,5 (8 couches)	150	2380-889	153300
7,5 x 7,5 (12 c.)	120	2380-905	153700
10 x 10 (8 couches)	120	2380-897	153600
10 x 10 (12 couches)	100	2380-913	158400
10 x 20 (12 couches)	50	2380-921	158500

#### Compresses (stériles) (par paquets de 2 ou 5 pièces)

5 x 5 (8 couches)	75 x 2	2380-947	152040
5 x 5 (8 couches)	30 x 5	2380-939	153165
7 x 10 (8 c.)	75 x 2	2583-540	152440
7 x 10 (8 c.)	30 x 5	1641-695	152465
5 x 5 (12 c.)	24 x 5	1641-711	153065
7,5 x 7,5 (8 c.)	75 x 2	2380-962	153340
7,5 x 7,5 (8 c.)	30 x 5	2380-954	153365
10 x 10 (12 c.)	24 x 5	2380-988	158465
10 x 20 (12 c.)	20 x 5	2380-970	158560
10 x 10 (8 c.)	75 x 2	2252-906	158040
10 x 10 (8 c.)	30 x 5	2252-914	153665

#### Tampons ronds (non stériles)

Ø 3 (n° 3)	250	1642-198	150800
Ø 4,5 (n° 4)	100	1642-214	151300
Ø 5,5 (n° 5)	100	1642-230	151400

#### Tampons ronds (stériles) (par paquets de 5 pièces)

Ø 3 (n° 3)	30 x 5	2381-002	150860
Ø 4,5 (n° 4)	24 x 5	2381-010	151360



# Nos solutions pour les déchirures cutanées

ISTAP (Leblanc et al)

Réf: Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin, 2018.

Etude ONLY\*

\*Référence: David, F., Wurtz, J-L., Breton, N., Bisch, O., Gazeau, P., Kerihuel, J-C., Guibon, O. Comparison of two wound contact layers in acute wounds. Poster presentation at Journées Cicatrisations conference, Paris, France, 2017.


- Il est indispensable de réagir rapidement que ce soit en cas de lambeau cutané vital total ou partiel:
1. Arrêtez un saignement en appliquant une pression constante sur la plaie. En cas de saignement important, vous pouvez utiliser un pansement avec un effet hémostatique.
  2. Si nécessaire: nettoyer et désinfecter la plaie
  3. Remettre en place le lambeau cutané le plus vite possible
  4. Fixer avec Mepitel One

## TYPE 1: Déchirures cutanées sans perte tissulaire




- Remettre en place le lambeau cutané avec une pincette et le fixer
- Placer Mepitel One comme fixation
- Mepitel One peut rester en place jusqu'à 14 jours. Laisser au minimum 5 jours en place pour que le lambeau de peau puisse s'adhérer au tissu sous-jacent.
- Ne pas rincer ou nettoyer la plaie entre-temps

## TYPE 2: Déchirures cutanées avec perte tissulaire partielle

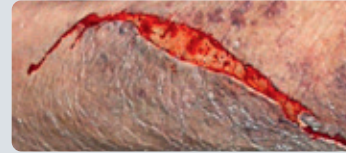

- Remettre en place le lambeau cutané avec une pincette et le fixer
- Placer Mepitel One ou Mepilex Border Flex comme fixation
- Mepitel One peut rester en place jusqu'à 14 jours. Laisser au minimum 5 jours en place pour que le lambeau de peau puisse s'adhérer au tissu sous-jacent.
- Ne pas rincer ou nettoyer la plaie entre-temps

## TYPE 3: Déchirures cutanées avec perte tissulaire complète

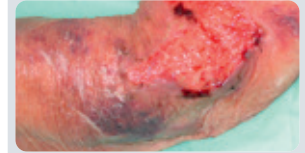

- Premiers jours après traumatisme: - Habituellement beaucoup d'exsudat - Changer Mepilex Border Flex seulement en cas de saturation
- En cas de grande perte de tissu, la guérison peut prendre plus de temps.

PEU D'EXSUDATS



BEAUCOUP D'EXSUDATS

PEU D'EXSUDATS



BEAUCOUP D'EXSUDATS

### PHASE 1:

Lambeau cutané n'est pas encore fixé et/ou plaie ouverte

### PHASE 2:

Lambeau cutané est fixé/avec une plaie ouverte guérie ou en phase de guérison

### PHASE 3:

La plaie est guérie

Mepitel® One

Mepilex® Border Flex



Mepitel® One



Mesoft® **OU** Mesorb®

+ fixation

Mepitel® One



Mesoft®



Mesorb®

+ fixation



Mepilex® Border Flex

Epaderm®  
Crème

**En cas d'INFECTION**

Mepilex® Ag \*

Mepilex® Border Ag

\* Fixation avec **Tubi** 3-WAY Medical

# Nos solutions pour les ulcères diabétiques

## Un traitement antimicrobien est nécessaire (Infection)\*

Lit de la plaie

Necrose: Debrider



Fibrine: Nettoyer



Granulatie: Protéger



Profondeur



Cavité



Superficiel

Sèche



Mepitel® One (+ fixation)



Humide



Melgisorb® Ag



Mepilex® Border Flex



Mepilex® Border Ag

Moisture (Exsudat)

Mouillé



Exufiber® Ag+



Mepilex® Border Flex



Mepilex® Border Ag

Fortement Mouillé



Exufiber® Ag+



Mextra® Superabsorbent (+ fixation)

Exufiber® Ag+



Mextra® Superabsorbent (+ fixation)



\*Dans le cas d'UPD infectés (voir photo), on recommande généralement un débridement, un antiseptique local et des antibiotiques systémiques. Les infections actives doivent être transférées de toute urgence à une EMD. Des agents antimicrobiens topiques, présents par exemple dans des produits nettoyants ou des pansements, peuvent être utilisés conjointement avec des antibiotiques pour traiter des infections bénignes. Ces produits ou pansements peuvent également être utilisés seuls pour le traitement des UPD associés à un risque d'infection élevé.

## Un traitement antimicrobien n'est pas nécessaire

Lit de la plaie

Necrose noire sèche



Jaune ou Rouge



Profondeur



Cavité



Superficiel

Sèche



Mepitel® One (+ fixation)



Humide



Exufiber®\*\*



Mepilex® Border Flex



Mepilex® Border Flex

Moisture (Exsudat)

Mouillé



Exufiber®



Mepilex® Border Flex



Mepilex® Border Flex

Fortement Mouillé



Exufiber®



Mextra® Superabsorbent (+ fixation)

Mepitel® One



Mextra® Superabsorbent (+ fixation)

\*\* Utilisez Exufiber que s'il y a suffisamment d'exsudat.

# Nos solutions pour l'ulcère veineux



## ÉVALUATION:

1. Évaluer et diagnostiquer le type d'ulcère de jambe; évaluer l'intégrité de la peau.
2. Déterminer les objectifs de traitement.
3. Préparer le lit de la plaie et la zone périlésionnelle. Un débridement des tissus non viables est à considérer le cas échéant.
4. Nettoyer la jambe et la plaie. Si la plaie n'est pas infectée, nettoyer et éponger. En cas d'infection, nettoyer puis appliquer une solution désinfectante.

## EXSUDAT ABONDANT



## EXSUDAT MODÉRÉ



## EXSUDAT LIMITÉ



## HYDRATATION DE LA PEAU

**Epiderm<sup>®</sup>**  
*Crème*



## GESTION DE L'EXSUDAT:

Choix du pansement

Si plaie cavitaire  
ou profonde

**Exufiber<sup>®</sup>**



**Mextra<sup>®</sup> Superabsorbent**

**Exufiber<sup>®</sup>**

Sous  
bandage  
compressif

**Mepilex<sup>®</sup> XT**



**Mepilex<sup>®</sup> Border Flex**


Sous  
bandage  
compressif

**Mepilex<sup>®</sup> Lite**



Sous bas de  
compression

**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite**

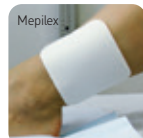

## En cas d'INFECTION

### IMPORTANT:

**Le changement de pansement doit être journalier.**

Si plaie cavitaire  
ou profonde

**Melgisorb<sup>®</sup> Ag/  
Exufiber<sup>®</sup> Ag+**



**Mextra<sup>®</sup> Superabsorbent**

Sous bandage  
compressif

**Mepilex<sup>®</sup> Ag**



Sous bas de  
compression

**Mepilex<sup>®</sup> Border Ag**

Sous bandage  
compressif

**Mepilex<sup>®</sup> Ag**



Sous bas de  
compression


**Mepilex<sup>®</sup> Border Ag**



## FIXATION

Utiliser une double longueur de Tubifast 2Way stretch:  
- 1ère longueur: protection supplémentaire de la peau et maintient des pansements  
- 2ème longueur: maintient les bandages compressifs par recouvrement (ne pas couper la double longueur)

**Tubi** ® **2-WAY STRETCH** ®  
WITH TECHNOLOGY

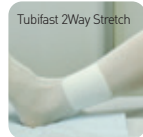

## THÉRAPIE DE COMPRESSION


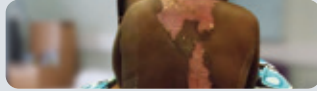



**La thérapie de compression** doit être initiée et appliquée par un **prestataire professionnel** afin de garantir un **traitement optimal** de l'ulcère veineux.

La compression ne peut être utilisée que dans les cas d'ulcères veineux. Si il y a suspicion d'un aspect artériel ou mixte, la compression est à remettre jusqu'à ce que l'insuffisance artérielle soit écartée.










# Nos solutions pour les brûlures

<b>Brûlures superficielles</b> 	<b>Brûlures du second degré</b> 	<b>Brûlures du troisième degré</b> 	<b>Sites donneurs</b> 	<b>Greffes cutanées</b> 	<b>Brûlures guéries</b> 	
Réduire la douleur Apaiser Calmer Hydrater	<b>Traitement à la maison</b> Pansements qui peuvent rester plus longtemps en place Pansements qui peuvent être retirés facilement	<b>Traitement à l'hôpital</b> Evaluer régulièrement Débrider chirurgicalement	Préparer la surface de la plaie à une greffe Prévenir des infections Evaluer régulièrement Débrider chirurgicalement	Permettre de laisser le pansement plus longtemps en place Absorber Réduire la douleur	Fixer la greffe Protéger la greffe	Réduire les démangeaisons Hydrater Protéger la peau fragile Prévenir la formation de cicatrices
Epi <span>derm</span> <sup>®</sup> <i>Crème</i>	Mepilex <sup>®</sup> XT *	Greffe + Mepitel <sup>®</sup> One + Mesorb <sup>®</sup> * ou Mextra <sup>®</sup> Superabsorbent *	Mepilex <sup>®</sup> XT *	Greffe + Mepilex <sup>®</sup> XT *	Mepi <span>form</span> <sup>®</sup>	
Mepitel <sup>®</sup> Film	Greffe + Mepitel <sup>®</sup> One + Mesorb <sup>®</sup> * ou Mextra <sup>®</sup> Superabsorbent *	Greffe + Mepilex <sup>®</sup> XT *	Mepitel <sup>®</sup> One + Mesorb <sup>®</sup> * ou Mextra <sup>®</sup> Superabsorbent *	Greffe + Mepitel <sup>®</sup> One + Mesorb <sup>®</sup> * ou Mextra <sup>®</sup> Superabsorbent *	Epi <span>derm</span> <sup>®</sup> <i>Crème</i>	
<b>En cas d'INFECTION</b>			Mepilex <sup>®</sup> Ag *			

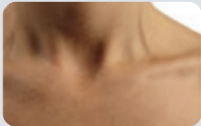\* Fixation avec **Tubi**<sup>®</sup> 2-WAY STAPLER

# Nos solutions pour la prévention et le traitement de la radiodermite

Les réactions cutanées sont évaluées sur la base de ROTG/EORTC <sup>1</sup> :	<b>GRADE 0</b>  Absence de réaction	<b>GRADE 1</b>  Érythème discret ou desquamation sèche avec diminution de la sudation		<b>GRADE 2</b>  Érythème douloureux ou enflammé, desquamation humide irrégulière, limitée aux plis et replis cutanés, oedème modéré.	<b>GRADE 3</b>  Desquamation humide confluyente, non limitée aux plis cutanés, oedème plus marqué.	<b>GRADE 4</b>  Nécrose cutanée ou ulcération de tout le derme, saignement spontané possible.
<b>PREVENTION</b>	Mepitel <sup>®</sup> Film <sup>2</sup>					
<b>TRAITEMENT</b>				Mepilex <sup>®</sup> Lite	Mepilex <sup>®</sup> Lite <sup>⊕</sup> Mepilex <sup>®</sup> XT	Mepitel <sup>®</sup> One <sup>⊕</sup> Mepilex <sup>®</sup> Transfer <sup>⊕</sup> Mesorb <sup>®</sup>
<b>FIXATION</b>				Tubifast <sup>®</sup>	Mepitel <sup>®</sup> Film <sup>⊕</sup>	Mepitac <sup>®</sup>
<b>INFECTION</b>				Mepilex <sup>®</sup> Ag <sup>*</sup>		
<b>HYDRATATION</b>	A la fin du traitement,			hydrater la peau irradiée avec Epaderm <sup>®</sup> crème		

<sup>1</sup> RTOG (1995): Radiation Therapy Oncology Group  
 EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer  
<sup>2</sup> Herst Patries M. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology 2014.

\* Mepilex Ag peut être utilisé entre les sessions de radiation, mais ne peut pas rester en place pendant la radiation.



# Conseils de découpe et de poses

BFWC0001/2002

**SafetaC**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY



[www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)  
Mölnlycke Health Care SA  
Berchemstationstraat 72 boîte 2  
2600 Berchem (Anvers)  
Tél: +32(0)3 286 89 50

Le nom et le logo Mölnlycke Health Care, SafetaC<sup>®</sup>, Mepilex<sup>®</sup>, Mepitel<sup>®</sup>, Mepitac<sup>®</sup>, Mepiform<sup>®</sup>, Mepore<sup>®</sup>, Mefix<sup>®</sup>, Mesorb<sup>®</sup>, Mextra<sup>®</sup> Superabsorbent, Gauze<sup>®</sup>, Mesoft<sup>®</sup>, Melgisorb<sup>®</sup>, Exufiber<sup>®</sup>, Epaderm<sup>®</sup> Crème, Mesalt<sup>®</sup> en Tubifast<sup>®</sup> 2-Way Stretch<sup>®</sup> sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care AB.



  
**Mölnlycke**<sup>®</sup>

### Conseils

- 1 Peu d'exsudats: Mepilex® Border Lite, Mepilex® Lite et Mepilex® Transfer. Exsudats moyen à important: Mepilex® Border, Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Post-Op, Mepilex® Border Ag, Mepilex®, Mepilex® XT, Mepilex® Ag, Mepilex® Transfer, Mepilex® Border Sacrum, Mepilex® Border Sacrum Ag, Mepilex® Heel, Mepilex® Border Heel ou Mepilex® Heel Ag.
- 2 Découpez les pansements avant de retirer les feuillets de protection, pour empêcher le pansement de coller aux ciseaux. Attention: Découpez uniquement la bordure et non le coussin des pansements Mepilex® Border, Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Lite, Mepilex® Border Ag, Mepilex® Border Sacrum, Mepilex® Border Sacrum Ag, Mepilex® Border Heel et Mepilex® Border Post-Op.
- 3 Fixez Mepilex®, Mepilex® XT, Mepilex® Lite, Mepilex® Ag en Mepilex® Transfer à l'aide d'une thérapie de compression, un bandage, un pansement tubulaire élastique tel que Tubifast® 2-Way Stretch, une bande adhésive comme Mefix® ou un film comme Mepore® Film. Mepilex® Border, Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Lite, Mepilex® Border Heel, Mepilex® Border Post-Op et Mepilex® Border Ag ne doivent pas être fixés.

### Creux axillaires




Mepilex® XT SafetaC TECHNOLOGY

20 x 20 cm

Mepilex® Ag SafetaC TECHNOLOGY

17,5 x 17,5 cm

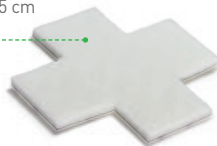

Mepilex® Border Flex SafetaC TECHNOLOGY

13 x 16 cm 15 x 19 cm


Mepilex® Border Ag SafetaC TECHNOLOGY

12,5 x 12,5 cm



### Coudes

#### Face externe

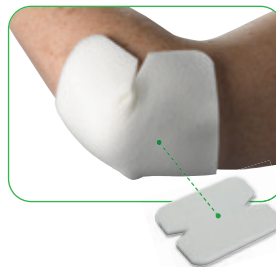


Mepilex® XT SafetaC TECHNOLOGY

10 x 10 cm

Mepilex® Ag SafetaC TECHNOLOGY

12,5 x 12,5 cm

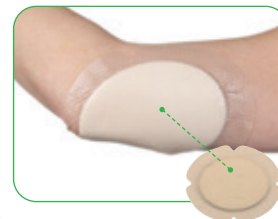

Mepilex® Border Flex SafetaC TECHNOLOGY

13 x 16 cm 15 x 19 cm

Mepilex® Border Ag SafetaC TECHNOLOGY

12,5 x 12,5 cm




Tubi HEP TECHNOLOGY



Ligne bleue

#### Face interne

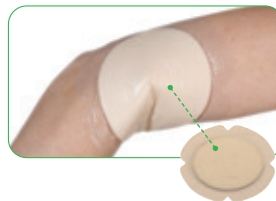

Mepilex® Border Flex SafetaC TECHNOLOGY

13 x 16 cm 15 x 19 cm

Mepilex® Border Ag SafetaC TECHNOLOGY

12,5 x 12,5 cm





## Talon



**Tubifast**  
WITH  
2-WAY STRETCH  
TECHNOLOGY



Ligne bleue

Mepilex® Heel *SafetaC*

13 x 20 cm

Mepilex® Heel Ag *SafetaC*

15 x 22 cm



Mepilex® Border Heel *SafetaC*

22 x 23 cm

## Malléoles



**Tubifast**  
WITH  
2-WAY STRETCH  
TECHNOLOGY



Ligne bleue

Mepilex® Heel *SafetaC*

13 x 20 cm

Mepilex® Heel Ag *SafetaC*

15 x 22 cm



Mepilex® Border Heel *SafetaC*

22 x 23 cm

## Pied



Mepilex® Border Lite *SafetaC*

7,5 x 7,5 cm



Mepilex® Border Flex *SafetaC*

13 x 16 cm 15 x 19 cm



Mepilex® Lite *SafetaC*

10 x 10 cm



**Tubifast**  
WITH  
2-WAY STRETCH  
TECHNOLOGY

Ligne bleue

Mepilex® Lite *SafetaC*


10 x 10 cm

## Orteils



Mepilex® XT *SafetaC*

10 x 10 cm

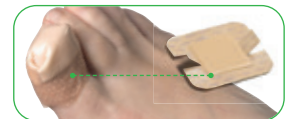

Mepilex® Border Lite *SafetaC*

10 x 10 cm

Mepilex® Ag *SafetaC*

12,5 x 12,5 cm



**Tubifast**  
WITH  
2-WAY STRETCH  
TECHNOLOGY



Ligne rouge

Mepilex® XT *SafetaC*

10 x 10 cm


Mepilex® Ag *SafetaC*

12,5 x 12,5 cm





## Tête

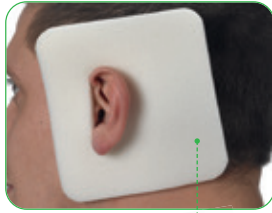

**Mepilex<sup>®</sup> XT** SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY  
10 x 10 cm



**Mepilex<sup>®</sup> Ag** SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY  
12,5 x 12,5 cm



Ligne jaune



**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY  
5 x 12,5 cm

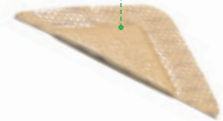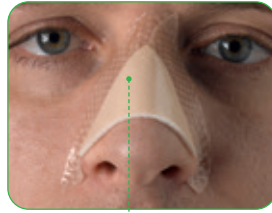

**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY  
7,5 x 7,5 cm



**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY  
4 x 5 cm

## Fixation - Protection

### Mepitel<sup>®</sup> Film SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY

Le pansement transparent qui protège la peau

La technologie SafetaC<sup>®</sup> pour des retraits moins douloureux.


#### • Indications

- En fixation des pansements primaires
- En fixation secondaire des cathéters IV
- En pansement final stérile
- En Landing Zone
- En combinaison avec des gels et des pommades



#### • Prévention des réactions cutanées péri-radiothérapie<sup>1</sup>

- prévient les **desquamations humides** chez des patientes atteintes du cancer du sein qui sont traitées par radiothérapie
- diminue la sévérité des réactions cutanées de **92%** comparativement à une crème hydratante
- a un effet bolus négligeable (< 0.1mm)

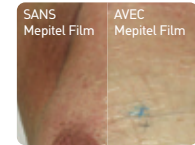

Quelques suggestions de fixation

#### • Sûr

- Pas de risque d'endommager les tissus nouvellement formés
- Transparent pour une bonne inspection de la plaie
- Barrière contre les bactéries et les virus



#### • Confortable

- Minimise la douleur et les traumatismes lors du changement de pansement
- S'adapte à l'anatomie du corps pour optimiser le confort du patient



#### • Pratique

- Ne laisse pas de résidus
- Imperméable aux liquides
- Permet la douche
- Flexible



1. Herst Patries M. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology 2014.


# Fixation

## Tubifast® WITH 2-WAY STRETCH® TECHNOLOGY



**La fixation idéale pour les pansements Mepilex®**  
Bandage tubulaire léger, extensible en largeur et en longueur.

- **Sûr**
  - Immobilise parfaitement le pansement sur la plaie
  - Absence de latex
- **Confortable**
  - Répartition uniforme de la pression sans compression ni constriction
  - Le patient garde toute sa liberté de mouvement
- **Pratique**
  - Application rapide et simple
  - Découpable et lavable

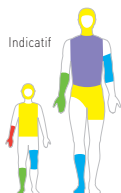

Disponible en différents codes de couleur en fonction de la circonférence de la partie du corps.

	N° d'art.	Code CNK/ pièce	Largeur x Longueur (cm x m)	Membres	Bte (pcs)	Emb. transport (pcs)
<b>LIGNE ROUGE</b>	2480	2380-285	3,5 x 1	9 - 18 cm	12	36
	2434	0628-180	3,5 x 10	9 - 18 cm	1	20
<b>LIGNE VERTE</b>	2481	2380-293	5 x 1	14 - 24 cm	12	36
	2436	0628-198	5 x 10	14 - 24 cm	1	24
<b>LIGNE BLEUE</b>	2482	2380-301	7,5 x 1	24 - 40 cm	12	36
	2438	0628-206	7,5 x 10	24 - 40 cm	1	30
<b>LIGNE JAUNE</b>	2483	2380-319	10,75 x 1	35 - 64 cm	12	36
	2440	0628-214	10,75 x 10	35 - 64 cm	1	12
<b>LIGNE POURPRE</b>	2479	2380-277	20 x 1	64 - 130 cm	12	48
	2444	2380-269	20 x 10	64 - 130 cm	1	15

Tubifast® 2-Way Stretch® est distribué exclusivement dans les hôpitaux par H. Nootens SA.  
Tél. : +32 [0]2 216 78 63 – E-mail : info@nootens.com



### Ligne jaune



#### Mise en place sur la tête



### Ligne pourpre




#### Mise en place sur le torse



### Ligne verte




#### Mise en place sur la main

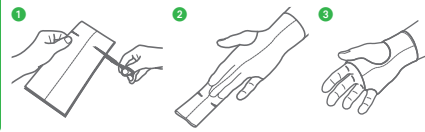

### Ligne jaune



#### Mise en place sur la hanche

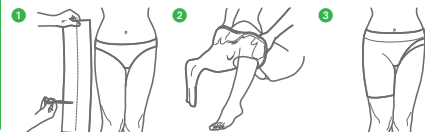

### Ligne bleue



#### Mise en place sur la jambe

